

كتالوج كتيبات المنتجات

جميع كتيبات منتجات DESU: المواصفات الفنية والمكونات ورموز المنتجات.

المحتويات

مجموعات التحويل

تحويلات Defit	صفحة 3
تحويلات Decurve	صفحة 5
تحويلات Depus	صفحة 7
مجموعة ضبط Depus	صفحة 9

أنظمة التصريف

سلسلة EVD-010	صفحة 11
سلسلة EVD-020	صفحة 13

القساطر

مجموعة القسطرة البطينية	صفحة 15
مجموعة القسطرة الصفاقية	صفحة 17
مجموعة القسطرة البطينية الصفاقية	صفحة 19
مجموعة القسطرة القطنية	صفحة 21
مجموعة القسطرة القطنية الصفاقية	صفحة 23
مجموعة قسطرة التصريف القطني	صفحة 25

الملحقات

جهاز منع السحب	صفحة 27
موصل القسطرة المستقيم	صفحة 29
موصل القسطرة من النوع L	صفحة 31
موصل القسطرة من النوع Y	صفحة 33

رفع الأم الجافية

غشاء الأم الجافية من الكولاجين DECOLL	صفحة 35
غشاء الأم الجافية من الكولاجين DURASHEET	صفحة 37

الطعوم العظمية


الطعوم العظمية DEBONE القائمة على الكولاجين	صفحة 39
---	---------

حلول الطعوم المعتمدة على الكولاجين

طعم الكولاجين XENOBONE بقري المصدر	صفحة 41
غشاء الكولاجين الحاجز COLL-OS	صفحة 43

تحويلات Defit

تحويل سيليكون مسطحة القاعدة بضغط ثابت، بمقاسات Ultra Small و Small و Regular، مع خيارات ضغط منخفض ومتوسط ومرتفع. لا تحتوي على معادن ومتوافقة مع التصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي المحوسب.

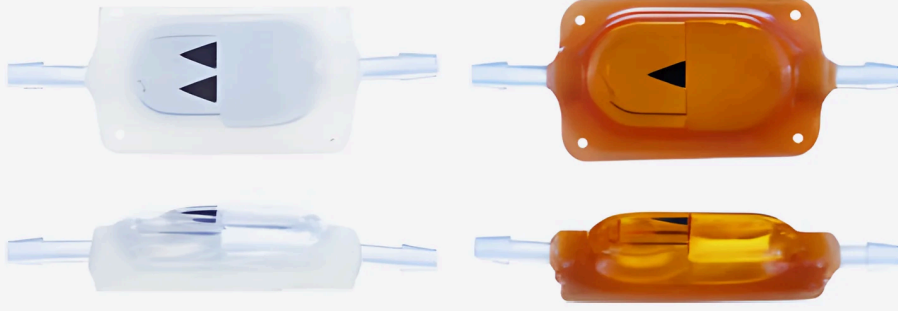

أبرز المزايا

01 ثلاثة أحجام للصمام

Ultra Small و Small و Regular؛ بطول كلي 35 و 40 و 45 مم.

03 لا أجزاء معدنية

جسم سيليكوني مسطح القاعدة؛ مناسب للتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي.

05 خيار مشبع بالمضاد الحيوي

يُشبع المضاد الحيوي في المادة ويتحرر بشكل مضبوط على مدى 28 يومًا.

02 ثلاثة ضغوط ثابتة

خيارات ضغط منخفض ومتوسط ومرتفع.

04 صمام أو مجموعة تحويل VP

مع قسطرة بطينية 23 سم وقسطرة صفاقية 120 سم ومُرشِد وموصل قائم الزاوية.

06 جهاز منع السحب الاختياري

تنتهي رموز المجموعات المزودة بجهاز منع السحب بـ «ASD».

عن المنتج

تنقسم الخيارات المشبعة بالمضاد الحيوي إلى: تشيع جسم الصمام فقط، ومجموعات شبه مشبعة بالمضاد الحيوي (صمام قياسي مع قساطر مشبعة بالمضاد الحيوي)، ومجموعات مشبعة كليًا بالمضاد الحيوي (جسم صمام مشبع وقساطر مشبعة). تُورّد جميع أنظمة التحويل للاستخدام مرة واحدة، معقمة بأكسيد الإيثيلين.

تتكون مجموعات التحويل البطينية الصفاقية Defit من صمام Defit وقسطرة بطينية بطول 23 سم وقسطرة صفاقية بطول 120 سم ومُرشد وموصل قائم الزاوية. ويمكن دمج جهاز منع السحب (ASD) اختياريًا وفقًا للمتطلبات السريرية.

المكونات

المواصفات الفنية

أبعاد الصمام

الطراز	الطول الكلي	طول الجسم	السماكة
Ultra Small	35 مم	20 مم	4.5 مم
Small	40 مم	25 مم	5.5 مم
Regular	45 مم	30 مم	7 مم

أبعاد القسطرة

القسطرة	القطر الداخلي	القطر الخارجي	الطول
بطيني	1.3 مم	2.5 مم	23 سم
صفاقية	1.1 مم	2.5 مم	120 سم

رموز المنتجات

التهئية	Ultra Small	Small	Regular
الصمام	DFUS-x	DFS-x	DFR-x
صمام مشبع بالمضاد الحيوي	ADFUS-x	ADFS-x	ADFR-x
مجموعة تحويل VP	DFUS-x-VCK	DFS-x-VCK	DFR-x-VCK
مجموعة تحويل VP + منع السحب	DFUS-x-VCK-ASD	DFS-x-VCK-ASD	DFR-x-VCK-ASD
مجموعة VP · قساطر مشبعة	-	DFS-x-VACK	-
مجموعة VP · قساطر مشبعة + منع السحب	-	DFS-x-VACK-ASD	-
مجموعة VP · صمام وقساطر مشبعة	-	-	ADFR-x-VACK
مجموعة VP · صمام وقساطر مشبعة + منع السحب	-	-	ADFR-x-VACK-ASD

استبدل x بحرف الضغط: L منخفض، M متوسط، H مرتفع.

● الرموز البرتقالية لمنتجات مشبعة بالمضاد الحيوي؛ إذ يُشعّ العامل في المادة ويتحرر بشكل مضبوط على مدى 28 يومًا.

امسح الرمز لصيغة المنتج
والجداول الكاملة والمعلومات
المحدّثة.



تحويلات Decurve

تحويله سيليكون لثقب الحفر بضغط ثابت، بمقاسي صمام للأطفال وللبالغين، مع خيارات ضغط منخفض ومتوسط ومرتفع. تحتوي على خزان ولا تحتوي على معادن.



أبرز المزايا

- | | |
|----|--|
| 01 | صمام لثقب الحفر
جسم سيليكوني دائري مزود بخزان. |
| 02 | للأطفال والبالغين
حجمان للصمام: قطر اسمي 23 مم و28 مم. |
| 03 | ثلاثة ضغوط ثابتة
خيارات ضغط منخفض ومتوسط ومرتفع. |
| 04 | لا أجزاء معدنية
بولي بروبيلين ومطاط سيليكون؛ مناسب للتصوير بالرنين المغناطيسي والتصوير المقطعي. |
| 05 | صمام أو مجموعة تحويله VP
مع قسطرة بطينية 23 سم وقسطرة صفاقية 120 سم ومُرشد وموصل قائم الزاوية. |
| 06 | خيار مشبع بالمضاد الحيوي
يُشعّ المضاد الحيوي في المادة ويتحرر بشكل مضبوط على مدى 28 يومًا. |

عن المنتج

تُخَصَّر مجموعات تحويل Decurve بمقاسين للصمام للمرضى الأطفال وبالغين. ويُقدَّم كلا المقاسين بخيارات ضغط ثابت منخفض ومتوسط ومرتفع، كأنظمة قياسية وشبه مشبعة بالمضاد الحيوي ومشبعة كلياً بالمضاد الحيوي ومزودة بجهاز منع السحب.

تتكون مجموعات التحويل البطينية الصفاقية Decurve من صمام Decurve وقسطرة بطينية بطول 23 سم وقسطرة صفاقية بطول 120 سم ومُرشِد وموصل قائم الزاوية. ويمكن إضافة جهاز منع السحب وفقاً للتهيئة السريرية. تستخدم القساطر المشبعة بالمضاد الحيوي عاملاً مشبعاً يتحرر بشكل مضبوط لمدة 28 يوماً. تُورَد جميع أنظمة التحويل معقمة بأكسيد الإيثيلين.

المكونات

قسطرة صفاقية

قسطرة بطينية

صمام التحويل

جهاز منع السحب (اختياري)

موصل قائم الزاوية

المُرشِد

المواصفات الفنية

أبعاد الصمام

القطر الاسمي	الطراز
23 مم	Decurve للأطفال
28 مم	Decurve للبالغين

أبعاد القسطرة

القطر الداخلي	القطر الخارجي	الطول	القسطرة
1.3 مم	2.5 مم	23 سم	بطيني
1.1 مم	2.5 مم	120 سم	صفاقية

رموز المنتجات

للأطفال	للبالغين	التهيئة
DCP-x	DCA-x	الصمام
ADCP-x	ADCA-x	صمام مشبع بالمضاد الحيوي
DCP-x-VCK	DCA-x-VCK	مجموعة تحويل VP
DCP-x-VCK-ASD	DCA-x-VCK-ASD	مجموعة تحويل VP + منع السحب
DCP-x-VACK	DCA-x-VACK	مجموعة VP · قساطر مشبعة
DCP-x-VACK-ASD	DCA-x-VACK-ASD	مجموعة VP · قساطر مشبعة + منع السحب
ADCP-x-VACK	ADCA-x-VACK	مجموعة VP · صمام وقساطر مشبعة
ADCP-x-VACK-ASD	ADCA-x-VACK-ASD	مجموعة VP · صمام وقساطر مشبعة + منع السحب

استبدل x بحرف الضغط: L منخفض، M متوسط، H مرتفع.


● الرموز البرتقالية لمنتجات مشبعة بالمضاد الحيوي؛ إذ يُشَتَّع العامل في المادة ويتحرر بشكل مضبوط على مدى 28 يوماً.



امسح الرمز لصيغة المنتج
والجداول الكاملة والمعلومات
المحدثة.

تحويلات Depus

عائلة تحويلات بصمام من البولي سلفون مع آلية كرة من الياقوت و نابض من التيتانيوم: ضغوط ثابتة منخفضة ومتوسطة ومرتفعة وخيارات قابلة للضبط، في مجموعات VP و LP.

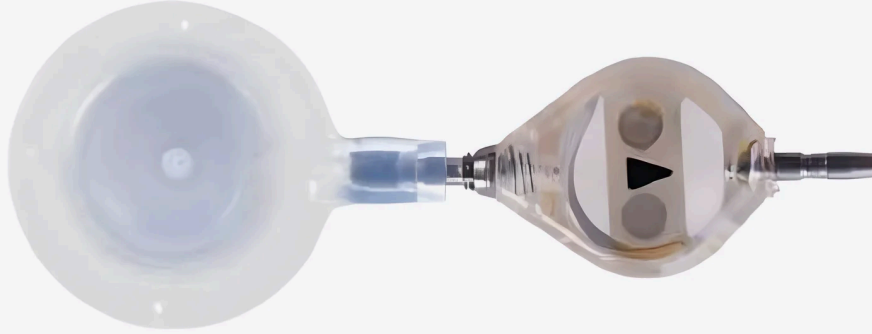

أبرز المزايا

01 صمام من البولي سلفون

آلية بكرة ياقوتية ونابض تيتانيوم؛ يفتح تلقائيًا تحت ضغط البطين الإيجابي.

03 مجموعات VP و LP

تكوينات بطينية صفاقية وقطنية صفاقية.

02 ثابت وقابل للضبط

ضغوط ثابتة منخفضة ومتوسطة ومرتفعة؛ وصمامات قابلة للضبط بمقاسي الأطفال والبالغين.

04 خيار مشبع بالمضاد الحيوي

يُشَتَّع المضاد الحيوي في المادة ويتحرر بشكل مضبوط على مدى 28 يومًا.

06 مجموعة ضبط Depus

تُقرأ الصمامات القابلة للضبط وتُضبط باستخدام المجموعة.

05 منع السحب والخزان

يمكن إضافتها إلى المجموعات كخيارات.

عن المنتج

تهيئات بقساطر بطينية و صفاقية مشبعة بالمضاد الحيوي. تُقدّم أنظمة Depus ذات الضغط الثابت بإعدادات منخفضة ومتوسطة ومرتفعة.

تتضمن مجموعات التحويل القطنية الصفاقية صمام Depus والقسطرة القطنية والقسطرة الصفاقية مع إبرة توهي 14 G وسلك توجيه 0.018". تتوفر أنظمة LP بقساطر قياسية أو مشبعة بالمضاد الحيوي.

تجمع مجموعات التحويل البطينية الصفاقية Depus صمام Depus من البولي سلفون مع قسطرة بطينية بطول 23 سم وقسطرة صفاقية بطول 120 سم ومُرشد وموصل قائم الزاوية. ويمكن إضافة جهاز منع السحب وخزان وفقًا للحاجة السريرية. وإلى جانب مجموعات VP القياسية، تتوفر

المكونات

المواصفات الفنية

الأبعاد الفنية

المكون	القطر الداخلي	القطر الخارجي	الطول
قسطرة بطينية	1.3 مم	2.5 مم	23 سم
قسطرة صفاقية	1.1 مم	2.5 مم	120 سم

رموز المنتجات

Depus ثابت الضغط


التهيئة	الرمز
الصمام	DP-x
مجموعة تحويل VP	DP-x-VCK
مجموعة تحويل VP + منع السحب	DP-x-VCK-ASD
مجموعة VP · قساطر مشبعة	DP-x-VACK
مجموعة VP · قساطر مشبعة + منع السحب	DP-x-VACK-ASD
مجموعة تحويل LP	LPDP-x-LTCK
مجموعة LP · قساطر مشبعة	LPDP-x-LTACK

Depus القابل للضبط

التهيئة	للأطفال	للبالغين
الصمام	DP-A	DPA-A
صمام مشبع بالمضاد الحيوي	ADP-A	ADPA-A
مجموعة تحويل VP	DP-A-VCK	DPA-A-VCK
مجموعة VP · قساطر مشبعة	DP-A-VACK	DPA-A-VACK
صمام مشبع · مجموعة VP	ADP-A-VCK	ADPA-A-VCK
صمام وقساطر مشبعة · مجموعة VP	ADP-A-VACK	ADPA-A-VACK
مجموعة تحويل VP + منع السحب	DP-A-VCK-ASD	DPA-A-VCK-ASD
مجموعة VP · قساطر مشبعة + منع السحب	DP-A-VACK-ASD	DPA-A-VACK-ASD
صمام مشبع · مجموعة VP + منع السحب	ADP-A-VCK-ASD	ADPA-A-VCK-ASD
صمام وقساطر مشبعة · مجموعة VP + منع السحب	ADP-A-VACK-ASD	ADPA-A-VACK-ASD

استبدل x بحرف الضغط: L منخفض، M متوسط، H مرتفع.

● الرموز البرتقالية لمنتجات مشبعة بالمضاد الحيوي؛ إذ يُشعّ العامل في المادة ويتحرر بشكل مضبوط على مدى 28 يومًا.

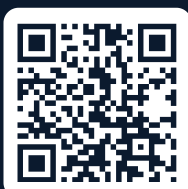

مَجْمُوعَةُ ضَبْطِ Depus

الأدوات اللازمة لتحديد موضع صمام Depus القابل للضبط وقراءة ضغطه وضبطه. بإصداري Pressure 3 و Pressure 5، تُورَد في حقيبة غير معقمة وقابلة لإعادة الاستخدام.



أبرز المزايا

02 Pressure 5 و Pressure 3 إصداران، بثلاثة وخمسة مستويات ضغط.

إصداران، بثلاثة وخمسة مستويات ضغط.

01 حدّد الموضع، اقرأ، اضبط

تحدد أداة تحديد الموضع مكان الصمام، وتُظهر البوصلة الضغط الحالي، ويضبط المغناطيس الضغط المستهدف.

04 قابل لإعادة الاستخدام

يُورَد في حقيبة غير معقمة قابلة لإعادة الاستخدام.

03 لصمامات Depus القابلة للضبط

مصمم للاستخدام مع صمامات Depus القابلة للضبط.

عن المنتج

تُقدّم مجموعة الضبط بإصدارين لأنظمة تحويل Depus القابلة للضبط 3 و Pressure 5 و Pressure. المنتج غير معقم ويُحفظ في حقيبة مخصصة قابلة لإعادة الاستخدام.

مجموعة ضبط Depus نظام ملحقات يدعم الضبط غير الجراحي لضغط صمام تحويل Depus القابل للضبط. تُستخدم أداة تحديد الموضع (Locator) لتحديد الصمام والاتجاهات المستهدفة لمستويات الضغط. ويضبط المغناطيس (Magnet) الصمام على الضغط المستهدف. وتستخدم البوصلة (Compass) للتحقق من مستوى الضغط.

المكونات

المغناطيس (Magnet)

أداة تحديد الموضع (Locator)

حقيبة حمل قابلة لإعادة الاستخدام

البوصلة (Compass)

المواصفات الفنية

أنظمة Pressure 3 و Pressure 5

الخاصية	Pressure 3	Pressure 5
مجموعة الضبط	متوفر	متوفر
أداة تحديد الموضع (Locator)	نعم	نعم
المغناطيس (Magnet)	نعم	نعم
البوصلة (Compass)	نعم	نعم
خيارات الضغط	3 مستويات	5 مستويات
قابل لإعادة الاستخدام	نعم	نعم
معقم	لا	لا

رموز المنتجات


الرمز	الوصف
DP-ADJKIT3	مجموعة ضبط Depus 3 Pressure
DP-ADJKIT5	مجموعة ضبط Depus 5 Pressure

امسح الرمز لصيغة المنتج
والجداول الكاملة والمعلومات
المحدّثة.



سلسلة EVD-010

نظام التصريف البطني الخارجي: قسطرة بطينية بطول 31 سم، ومقياس قياس بطول 30 سم، وحجرة تنقيط 150 مل، وكيس تصريف 800 مل. مع قسطرة قياسية أو مشبعة بالمضاد الحيوي.

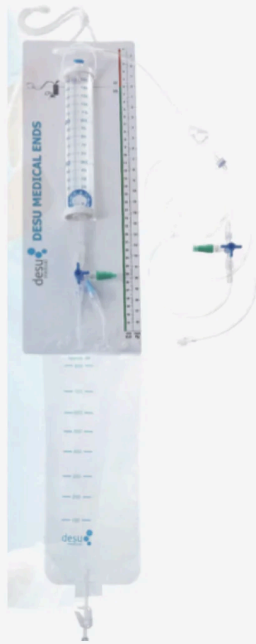

أبرز المزايا

- | | |
|--|---|
| 01 مجموعة كاملة واحدة
مكونات القسطرة والقياس والتجميع والتوصيل معًا. | 02 قسطرة بطينية 31 سم
القطر الداخلي 1.5 مم، والقطر الخارجي 3.0 مم. |
| 03 مقياس قياس 30 سم
قراءات الضغط بوحدتي mmHg و cmH ₂ O. | 04 التجميع
حجرة تنقيط 150 مل وكيس تصريف 800 مل. |
| 05 التوصيل والمرشح
خط مقوّى بطول 60 سم، وموصلان ثلاثيا الاتجاه، ومرشح كاره للماء. | 06 خيار مشبع بالمضاد الحيوي
يُشعّع المضاد الحيوي في المادة ويتحرر بشكل مضبوط على مدى 28 يومًا. |

عن المنتج

تتبع ضغط السائل الدماغي الشوكي بوحدتي ملم زئبق وسم ماء، وحجرة تنقيط 150 مل، وكيس تصريف 800 مل مزودًا بمرشح هواء، وموصلين ثلاثي الاتجاه، ومرشحًا كارهًا للماء.

تجمع سلسلة EVD-010 قسطرة تصريف بطني خارجي بقطر داخلي 1.5 مم وقطر خارجي 3.0 مم وطول 31 سم مع نظام تصريف خارجي كامل. يتضمن النظام خط توصيل مقوَّى بطول 60 سم مزودًا بآلية قفل، ومقياس قياس بطول 30 سم يدعم

المكونات

حجرة التنقيط	مقياس القياس	القسطرة البطينية
موصل ثلاثي الاتجاه	خط التوصيل المقوَّى	كيس التصريف
لسان التثبيت	المُرشد	المرشح الكاره للماء
ميزل (تروكار) مائل	موصل Luer Lock والغطاء البعيد	

المواصفات الفنية

الخاصية	EVD-010
القطر الداخلي للقسطرة البطينية	1.5 مم
القطر الخارجي للقسطرة البطينية	3.0 مم
طول القسطرة البطينية	31 سم
خط توصيل مقوَّى	60 سم
مقياس القياس	30 سم
وحدات الضغط	mmHg / cmH ₂ O
حجرة التنقيط	150 مل
كيس التصريف	800 مل
موصلات ثلاثية الاتجاه	وحدتان (2)
مرشح كاره للماء	نعم
خيارات القسطرة	قياسي / مشبع بالمضاد الحيوي
خيار مشبع بالمضاد الحيوي	تحرر مضبوط لمدة 28 يومًا

رموز المنتجات

الرمز	الوصف
ENDS-C-010	نظام تصريف بطني خارجي مع قسطرة بطينية قياسية
ENDS-AC-010	نظام تصريف بطني خارجي مع قسطرة بطينية مشبعة بالمضاد الحيوي
LCK-ENDS-010	نظام تصريف قطني خارجي مع قسطرة قطنية قياسية
LACK-ENDS-010	نظام تصريف قطني خارجي مع قسطرة قطنية مشبعة بالمضاد الحيوي

رموز منتجات القسطرة

الرمز	الوصف
EVDCK-1530310	قسطرة تصريف بطني خارجي (القطر الداخلي 1.5 مم / القطر الخارجي 3.0 مم / الطول 31 سم)
EVDACK-1530310	قسطرة تصريف بطني خارجي مشبعة بالمضاد الحيوي (القطر الداخلي 1.5 مم / القطر الخارجي 3.0 مم / الطول 31 سم)
EVDACK-1530350	قسطرة تصريف بطني خارجي مشبعة بالمضاد الحيوي (القطر الداخلي 1.5 مم / القطر الخارجي 3.0 مم / الطول 35 سم)
EVDACKS-1934350	قسطرة تصريف بطني خارجي مشبعة بالمضاد الحيوي (القطر الداخلي 1.9 مم / القطر الخارجي 3.4 مم / الطول 35 سم)
EVDCAK-1934350	قسطرة تصريف بطني خارجي مشبعة بالمضاد الحيوي (القطر الداخلي 1.9 مم / القطر الخارجي 3.4 مم / الطول 35 سم)

● الرموز البرتقالية لمنتجات مشبعة بالمضاد الحيوي؛ إذ يُشْتَع العامل في المادة ويتحرر بشكل مضبوط على مدى 28 يومًا.

امسح الرمز لصفحة المنتج والجدول الكاملة والمعلومات المحدثة.



+90 312 299 25 63

sales@desu.tr

info@desu.tr

desu.tr

desu

هذا الكتيب موجّه لمتخصصي الرعاية الصحية. راجع تعليمات الاستخدام للاطلاع على دواعي الاستعمال وموانعه والتحذيرات وطريقة التعامل. تختلف حالة التسجيل من بلد لآخر.

سلسلة EVD-020

نظام تصريف خارجي متقدم يُستخدم مع قسطرة بطينية أو قطنية: مقياس الضغط وحجرة التنقيط وكيس التصريف والمرشح في نظام واحد.



أبرز المزايا

01 بطيني أو قطني

نظام تصريف خارجي يُستخدم مع قسطرة بطينية أو قطنية.

03 مقياس قياس 30 سم

قراءات الضغط بوحدتي mmHg و cmH₂O.

05 نظام مغلق

مرشح كاره للماء وموصلان ثلاثيا الاتجاه.

02 خط مقوَّى

خط توصيل بطول 60 سم مع آلية قفل.

04 التجميع

حجرة تنقيط 150 مل وكيس تصريف 800 مل مزوّد بمرشح هواء.

06 خيار مشبع بالمضاد الحيوي

يُشعّع المضاد الحيوي في المادة ويتحرر بشكل مضبوط على مدى 28 يومًا.

عن المنتج

150 مل، وكيس تصريف 800 مل مزودًا بمرشح هواء، وموصلين ثلاثي الاتجاه، ومرشحًا كارهًا للماء.

تجمع سلسلة EVD-020 تهيئات قسطرة مختلفة مع نظام تصريف متقدم لدعم إدارة التصريف الخارجي للسائل الدماغي الشوكي ومراقبة الضغط. يتضمن نظام التصريف خط توصيل مقوَّى بطول 60 سم مزودًا بألية قفل، ومقياس قياس ضغط مدرّجًا بطول 30 سم، وحجرة تنقيط

المكونات

المواصفات الفنية



الخاصية	نظام EVD-020
خط توصيل مقوَّى	60 سم
آلية القفل	نعم
مقياس القياس	30 سم
وحدات الضغط	mmHg / cmH ₂ O
حجرة التنقيط	150 مل
كيس التصريف	800 مل
مرشح الهواء لكيس التصريف	نعم
موصلات ثلاثية الاتجاه	وحدتان (2)
مرشح كاره للماء	نعم
خيار القسطرة البطينية	نعم
خيار القسطرة القطنية	نعم
خيار القسطرة المشبعة بالمضاد الحيوي	نعم - تحرر مضبوط لمدة 28 يومًا

رموز المنتجات

الرمز	الوصف
ENDS-C-020	نظام تصريف بطيني خارجي متقدم مع قسطرة بطينية قياسية
ENDS-AC-020	نظام تصريف بطيني خارجي متقدم مع قسطرة بطينية مشبعة بالمضاد الحيوي
LCK-ENDS-020	نظام تصريف خارجي متقدم مع قسطرة قطنية قياسية
LACK-ENDS-020	نظام تصريف خارجي متقدم مع قسطرة قطنية مشبعة بالمضاد الحيوي

خيارات العبوة

الرمز	الوصف
ENDS-B1	كيس تصريف 800 مل مزود بمرشح هواء - قطعة واحدة (1)
ENDS-B5	كيس تصريف 800 مل مزود بمرشح هواء - 5 قطع
ENDS-B10	كيس تصريف 800 مل مزود بمرشح هواء - 10 قطع

الملحقات المتوافقة

الرمز	الوصف
ENDS-020	نظام التصريف EVD-020
ENDS-HL	ملحق متوافق مع EVD-020
ENDS-LASER	ملحق متوافق مع EVD-020

● الرموز البرتقالية لمنتجات مشبعة بالمضاد الحيوي؛ إذ يُشَبَّع العامل في المادة ويتحرر بشكل مضبوط على مدى 28 يومًا.

امسح الرمز لصيغة المنتج والجدول الكاملة والمعلومات المحدثة.



+90 312 299 25 63

sales@desu.tr

info@desu.tr

desu.tr

هذا الكتيب موجه لمختصي الرعاية الصحية، راجع تعليمات الاستخدام للاطلاع على دواعي الاستعمال وموانعه والتحذيرات وطريقة التعامل. تختلف حالة التسجيل من بلد لآخر.

مجموعة القسطرة البطينية

قسطرة بطينية من سيليكون ظليل للأشعة مع علامات طول من التنتالوم من 5 إلى 15 سم و24 ثقب تصريف في أربعة صفوف. قياسية، أو مشبعة بالمضاد الحيوي مع تحرر مضبوط لمدة 28 يومًا.



أبرز المزايا

01 سيليكون ظليل للأشعة

يمكن تتبّع الموضع بالتصوير؛ علامات طول من التنتالوم.

03 علامات الطول

عند كل سنتيمتر من الخامس إلى الخامس عشر.

05 محتويات المجموعة

قسطرة بطينية، ومُرْشِد، وموصل قائم الزاوية.

02 23 سم

القطر الداخلي 1.3 مم، والقطر الخارجي 2.5 مم.

04 24 ثقب تصريف

أربعة صفوف من ست فتحات في الجزء القريب.

06 خيار مشبع بالمضاد الحيوي

يُشَتَّع المضاد الحيوي في المادة ويتحرر بشكل مضبوط على مدى 28 يومًا.

عن المنتج

تتضمن مجموعة القسطرة البطينية القسطرة البطينية مع مُرشِد وموصل قائم الزاوية. وإلى جانب القسطرة القياسية، يتوفر خيار مشبع بالمضاد الحيوي. في القسطر المشبعة بالمضاد الحيوي، يستمر التحرر المضبوط للمكونات الفعالة لمدة 28 يومًا.

تُقدَّم قسطر التحويلة البطينية من DESU كقسطر سيليكون بقطر داخلي 1.3 مم وقطر خارجي 2.5 مم وطول 23 سم. تمتد علامات الطول من التنتالوم من 5 إلى 15 سم. تحتوي منطقة التصريف القريبة على 24 ثقبًا في أربعة صفوف من ستة.

المكونات

الموصل القائم الزاوية

المُرشِد

القسطرة البطينية

المواصفات الفنية

الخاصية	قسطرة بطينية
القطر الداخلي	1.3 مم
القطر الخارجي	2.5 مم
الطول	23 سم
علامات الطول	5-15 سم
ثقوب التصريف	24
نمط التصريف	4 صفوف × 6 ثقوب

الخيارات القياسية والمشبعة بالمضاد الحيوي

الخاصية	قسطرة بطينية قياسية	قسطرة بطينية مشبعة بالمضاد الحيوي
القطر الداخلي	1.3 مم	1.3 مم
القطر الخارجي	2.5 مم	2.5 مم
الطول	23 سم	23 سم
سيليكون	نعم	نعم
علامات الطول من التنتالوم	نعم	نعم
24 ثقب تصريف	نعم	نعم
التشبع بالمضاد الحيوي	لا	نعم
تحرر مضبوط للمضاد الحيوي	—	28 يومًا

رموز المنتجات

الرمز	الوصف
SVCK	مجموعة القسطرة البطينية القياسية
ASVCK	مجموعة القسطرة البطينية المشبعة بالمضاد الحيوي

● الرموز البرتقالية لمنتجات مشبعة بالمضاد الحيوي؛ إذ يُشعَّع العامل في المادة ويتحرر بشكل مضبوط على مدى 28 يومًا.



مجموعة القسطرة الصفاقية

قسطرة صفاقية من السيليكون بطول 120 سم مع علامات طول من التنتالوم من 5 إلى 20 سم. قياسية، أو مشبعة بالمضاد الحيوي مع تحرر مضبوط لمدة 28 يومًا.



أبرز المزايا

01 سيليكون ظليل للأشعة

يمكن تتبع الموضع بالتصوير؛ علامات طول من التنتالوم.

02 120 سم

القطر الداخلي 1.1 مم، والقطر الخارجي 2.5 مم.

03 علامات الطول

عند كل سنتيمتر من الخامس إلى العشرين.

04 قسم التصريف

فتحات تصريف على أربعة صفوف عند الطرف القريب.

05 خيار مشبع بالمضاد الحيوي

يُشَبَّع المضاد الحيوي في المادة ويتحرر بشكل مضبوط على مدى 28 يومًا.

عن المنتج

إلى جانب القسطرة الصفاقية القياسية، تتوفر قسطرة صفاقية مشبعة بالمضاد الحيوي. في القسطر المشبعة بالمضاد الحيوي، يستمر التحرر المضبوط للمكونات الفعالة لمدة 28 يومًا.

تُقدّم قسطر التحويلة الصفاقية من DESU كقسطر سيليكون بقطر داخلي 1.1 مم وقطر خارجي 2.5 مم وطول 120 سم. توضع علامات الطول من التنتالوم عند كل سنتيمتر من 5 إلى 20 سم. وتُرتَّب ثقبو التصريف عند الطرف القريب على امتداد أربعة صفوف.

المكونات

المواصفات الفنية

القسطرة الصفاقية

الخاصية	قسطرة صفاقية
القطر الداخلي	1.1 مم
القطر الخارجي	2.5 مم
الطول	120 سم
علامات الطول	5-20 سم
مادة العلامات	التنتالوم
المادة	سيليكون

الخيارات القياسية والمشبعة بالمضاد الحيوي

الخاصية	قسطرة صفاقية قياسية	قسطرة صفاقية مشبعة بالمضاد الحيوي
القطر الداخلي	1.1 مم	1.1 مم
القطر الخارجي	2.5 مم	2.5 مم
الطول	120 سم	120 سم
سيليكون	نعم	نعم
علامات الطول من التنتالوم	نعم	نعم
التشبع بالمضاد الحيوي	لا	نعم
تحرر مضبوط للمضاد الحيوي	—	28 يومًا

رموز المنتجات

الرمز	الوصف
SPCK	القسطرة الصفاقية
ASPK	القسطرة الصفاقية المشبعة بالمضاد الحيوي

● الرموز البرتقالية لمنتجات مشبعة بالمضاد الحيوي؛ إذ يُشَبَّع العامل في المادة ويتحرر بشكل مضبوط على مدى 28 يومًا.

امسح الرمز لصفحة المنتج
والجداول الكاملة والمعلومات
المحدّثة.



+90 312 299 25 63

sales@desu.tr

info@desu.tr

desu.tr

هذا الكتيّب موجّه لمتخصصي الرعاية الصحية. راجع تعليمات الاستخدام للاطلاع على دواعي الاستعمال وموانعه والتحذيرات وطريقة التعامل. تختلف حالة التسجيل من بلد لآخر.

مجموعة القسطرة البطينية الصفاقية

قسطر بطينية وصفاقية من السيليكون في مجموعة واحدة، مع علامات طول من التنتالوم. قياسية، أو مشبعة بالمضاد الحيوي مع تحرر مضبوط لمدة 28 يومًا.



أبرز المزايا

01 قسطنتان في مجموعة واحدة

قسطنتان من السيليكون: بطينية 23 سم وصفاقية 120 سم.

02 سيليكون ظليل للأشعة

يمكن تتبع الموضع بالتصوير؛ علامات طول من التنتالوم.

03 علامات الطول

5-15 سم على القسطرة البطينية، و5-20 سم على القسطرة الصفاقية.

04 محتويات المجموعة

القسطنتان، والمُرشد، وموصل قائم الزاوية.

05 خيار مشبع بالمضاد الحيوي

يُشبع المضاد الحيوي في المادة ويتحرر بشكل مضبوط على مدى 28 يومًا.

عن المنتج

الصفاقية. تحتوي منطقة التصريف القريبة للقسطرة البطينية على 24 ثقبًا في أربعة صفوف.

كبدل لمجموعة قسطرة VP القياسية، تتوفر أيضًا مجموعة بقساطر بطينية وصفاقية مشبعة بالمضاد الحيوي. تحمل القساطر المشبعة بالمضاد الحيوي المواد الفعالة مشبعة في مادة القسطرة، وتحرر بشكل مضبوط لمدة 28 يومًا.

المكونات

- المُرشد
- القسطرة الصفاقية
- القسطرة البطينية
- الموصل القائم الزاوية

المواصفات الفنية

الأبعاد الفنية

الخاصية	قسطرة بطينية	قسطرة صفاقية
القطر الداخلي	1.3 مم	1.1 مم
القطر الخارجي	2.5 مم	2.5 مم
الطول	23 سم	120 سم
علامات الطول	5-15 سم	5-20 سم
مادة العلامات	التنتالوم	التنتالوم
المادة	سيليكون	سيليكون

الأنظمة القياسية والمشبعة بالمضاد الحيوي

الخاصية	مجموعة قسطرة VP قياسية	مجموعة قسطرة VP مشبعة بالمضاد الحيوي
قسطرة بطينية	قياسي	مشبع بالمضاد الحيوي
قسطرة صفاقية	قياسي	مشبع بالمضاد الحيوي
طول القسطرة البطينية	23 سم	23 سم
طول القسطرة الصفاقية	120 سم	120 سم
سيليكون	نعم	نعم
علامات من التنتالوم	نعم	نعم
المُرشد	نعم	نعم
موصل قائم الزاوية	نعم	نعم
التشبع بالمضاد الحيوي	لا	نعم
تحرر مضبوط للمضاد الحيوي	—	28 يومًا

رموز المنتجات

الرمز	الوصف
SVPCK	مجموعة القسطرة البطينية الصفاقية القياسية
ASVPCK	مجموعة القسطرة البطينية الصفاقية المشبعة بالمضاد الحيوي


● الرموز البرتقالية لمنتجات مشبعة بالمضاد الحيوي؛ إذ يُشعّ العامل في المادة وتحرر بشكل مضبوط على مدى 28 يومًا.



امسح الرمز لصفحة المنتج والجداول الكاملة والمعلومات المحدثة.

مجموعة القسطرة القطنية

قسطرة تحويلة قطنية من السيليكون بطول 100 سم مع علامات من التنتالوم من 5 إلى 20 سم و 24 ثقب تصريف في أربعة صفوف. تتوفر خيارات قياسية ومشبعة بالمضاد الحيوي.

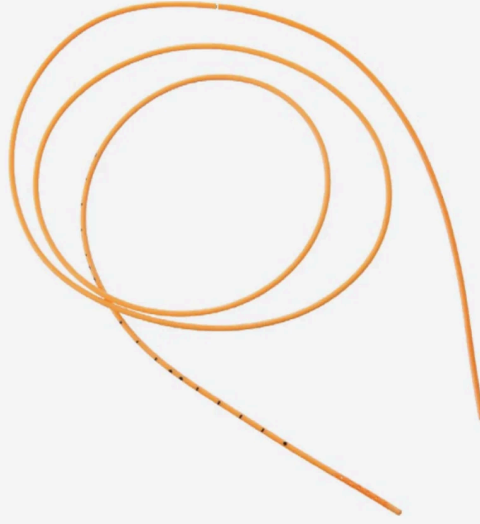

أبرز المزايا

01 سيليكون ظليل للأشعة

يمكن تتبع الموضع بالتصوير؛ علامات طول من التنتالوم.

02 100 سم

القطر الداخلي 0.8 مم، والقطر الخارجي 1.6 مم.

03 علامات الطول

عند كل سنتيمتر من الخامس إلى العشرين.

04 24 ثقب تصريف

أربعة صفوف من ست فتحات في الجزء القريب.

05 محتويات المجموعة

قسطرة قطنية، وإبرة توهي 14 G، وسلك توجيه، وقطعة تثبيت.

06 خيار مشبع بالمضاد الحيوي

يُشَعِّع المضاد الحيوي في المادة ويتحرر بشكل مضبوط على مدى 28 يومًا.

عن المنتج

إلى جانب القسطرة القطنية القياسية، يتوفر خيار قسطرة قطنية مشبعة بالمضاد الحيوي. يتمتع الخيار المشبع بالمضاد الحيوي بالأبعاد الأساسية نفسها للقسطرة القياسية، ويُعرض في الكatalog مع تحرر مضبوط للمضاد الحيوي لمدة 28 يومًا.

تجمع مجموعة القسطرة القطنية من DESU قسطرة قطنية من السيليكون بقطر داخلي 0.8 مم وقطر خارجي 1.6 مم وطول 100 سم مع إبرة توهي G 14 وسلك توجيه ولسان تثبيت. توضع علامات الطول من التنتالوم عند كل سنتيمتر من 5 إلى 20 سم. تحتوي منطقة التصريف القريبة على 24 ثقبًا في أربعة صفوف من ستة.

المكونات

- سلك التوجيه
- إبرة توهي G 14
- القسطرة القطنية
- لسان التثبيت

المواصفات الفنية

الخاصية	قسطرة قطنية
القطر الداخلي	0.8 مم
القطر الخارجي	1.6 مم
الطول	100 سم
علامات الطول	20-5 سم
مادة العلامات	التنتالوم
ثقوب التصريف	24
نمط التصريف	4 صفوف × 6 ثقوب
المادة	سيليكون

الخيارات القياسية والمشبعة بالمضاد الحيوي

الخاصية	قسطرة قطنية قياسية	قسطرة قطنية مشبعة بالمضاد الحيوي
القطر الداخلي	0.8 مم	0.8 مم
القطر الخارجي	1.6 مم	1.6 مم
الطول	100 سم	100 سم
سيليكون	نعم	نعم
علامات الطول من التنتالوم	نعم	نعم
24 ثقب تصريف	نعم	نعم
بنية مشبعة بالمضاد الحيوي	لا	نعم
تحرر مضبوط للمضاد الحيوي	—	28 يومًا

رموز المنتجات


الرمز	الوصف
LCK	مجموعة القسطرة القطنية
LACK	القسطرة القطنية المشبعة بالمضاد الحيوي

● الرموز البرتقالية لمنتجات مشبعة بالمضاد الحيوي؛ إذ يُشَبَّع العامل في المادة ويتحرر بشكل مضبوط على مدى 28 يومًا.



مجموعة القسطرة القطنية الصفاقية

مجموعة قطنية صفاقية تضم قسطرة قطنية من السيليكون بطول 100 سم وقسطرة صفاقية من السيليكون بطول 120 سم، مع علامات طول من التنتالوم. تتوفر خيارات قياسية ومشبعة بالمضاد الحيوي.

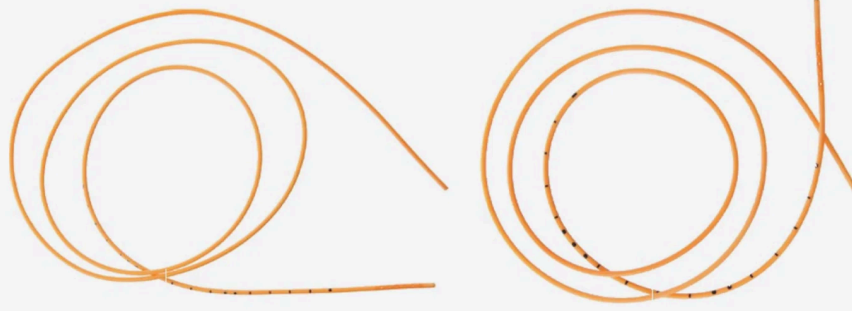

أبرز المزايا

01 قسطنتان في مجموعة واحدة

قسطنتان من السيليكون: قطنية 100 سم وصفاقية 120 سم.

03 علامات الطول

من السنتيمتر الخامس إلى العشرين على كلتا القسطنتين.

05 خيار مشبع بالمضاد الحيوي

يُشَبَّع المضاد الحيوي في المادة ويتحرر بشكل مضبوط على مدى 28 يومًا.

02 سيليكون ظليل للأشعة

يمكن تتبع الموضع بالتصوير؛ علامات طول من التنتالوم.

04 محتويات المجموعة

القسطنتان، وإبرة توهي G 14، وسلك توجيه، وقطعة تثبيت.

عن المنتج

تحتوي منطقة التصريف القريبة للقسطرة القطنية على 24 ثقبًا في أربعة صفوف من ستة. وإلى جانب القساطر القياسية، تتوفر أيضًا خيارات قساطر مشبعة بالمضاد الحيوي.

تجمع مجموعة القسطرة القطنية الصفاقية من DESU قسطرة قطنية بطول 100 سم وقسطرة صفاقية بطول 120 سم مع إبرة توهي G 14 وسلك توجيه. تتميز القسطرة القطنية بقطر داخلي 0.8 مم وقطر خارجي 1.6 مم؛ والقسطرة الصفاقية بقطر داخلي 1.1 مم وقطر خارجي 2.5 مم. كلتا القسطنتين مصنوعتان من السيليكون وتحملان علامات طول من التتالوم من 5 إلى 20 سم.

المكونات

إبرة توهي G 14
القسطرة الصفاقية
القسطرة القطنية
لسان التثبيت
سلك التوجيه

المواصفات الفنية

الأبعاد الفنية

الخاصية	قسطرة قطنية	قسطرة صفاقية
القطر الداخلي	0.8 مم	1.1 مم
القطر الخارجي	1.6 مم	2.5 مم
الطول	100 سم	120 سم
علامات الطول	20-5 سم	20-5 سم
مادة العلامات	التتالوم	التتالوم
المادة	سيليكون	سيليكون

الخيارات القياسية والمشبعة بالمضاد الحيوي

الخاصية	النظام القياسي	نظام مشبع بالمضاد الحيوي
قسطرة قطنية	قياسي	مشبع بالمضاد الحيوي
قسطرة صفاقية	قياسي	خيار مشبع بالمضاد الحيوي
طول القسطرة القطنية	100 سم	100 سم
طول القسطرة الصفاقية	120 سم	120 سم
سيليكون	نعم	نعم
علامات من التتالوم	نعم	نعم
إبرة توهي G 14	نعم	نعم
سلك التوجيه	نعم	نعم

رموز المنتجات


الرمز	الوصف
LPCK	القسطرة القطنية
LPACK	القسطرة القطنية المشبعة بالمضاد الحيوي

● الرموز البرتقالية لمنتجات مشبعة بالمضاد الحيوي؛ إذ يُشعَّع العامل في المادة ويتحرر بشكل مضبوط على مدى 28 يومًا.



مجموعة قسطرة التصريف القطني

قسطرة من السيليكون بطول 80 سم ومكونات التطبيق للتصريف القطني الخارجي، مع علامات من التنتالوم من 5 إلى 20 سم و24 ثقب تصريف. تتوفر خيارات قياسية ومشعبة بالمضاد الحيوي.

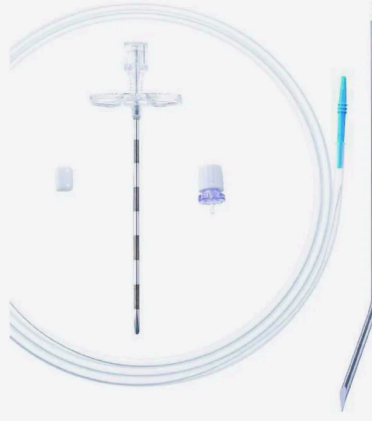

أبرز المزايا

01 للتصريف القطني الخارجي

ينقل السائل الدماغي الشوكي من المنطقة القطنية إلى نظام تصريف خارجي.

02 قسطرة سيليكون 80 سم

القطر الداخلي 0.8 مم، والقطر الخارجي 1.6 مم؛ ظليل للأشعة.

03 علامات الطول

علامات من التنتالوم عند كل سنتيمتر من الخامس إلى العشرين.

04 24 ثقب تصريف

أربعة صفوف من ست فتحات في الجزء القريب.

05 محتويات المجموعة

إبرة توهي، وسلك توجيه، ومبزل مائل، وموصل Luer Lock، وغطاء طرفي، وقطعة تثبيت.

06 خيار مشعب بالمضاد الحيوي

يُشَعِّع المضاد الحيوي في المادة ويتحرر بشكل مضبوط على مدى 28 يومًا.

عن المنتج

إلى جانب قسطرة التصريف القطني القياسية، يتوفر خيار قسطرة مشبعة بالمضاد الحيوي. في القساطر المشبعة بالمضاد الحيوي، تتحرر المكونات الفعالة بشكل مضبوط لمدة 28 يومًا.

تجمع مجموعة قسطرة التصريف القطني من DESU قسطرة قطنية من السيليكون بقطر داخلي 0.8 مم وقطر خارجي 1.6 مم وطول 80 سم مع إبرة توهي وسلك توجيه وميزل مائل وموصل Luer Lock ولسان تثبيت. توضع علامات الطول من التنتالوم عند كل سنتيمتر من 5 إلى 20 سم. تحتوي منطقة التصريف القريبة على 24 ثقبًا في أربعة صفوف من ستة.

المكونات

- سلك التوجيه
- إبرة توهي
- قسطرة التصريف القطني
- مبزل (تروكار) مائل
- موصل Luer Lock والغطاء البعيد
- لسان التثبيت

المواصفات الفنية

الخاصية	قسطرة التصريف القطني
القطر الداخلي	0.8 مم
القطر الخارجي	1.6 مم
الطول	80 سم
علامات الطول	20-5 سم
مادة العلامات	التنتالوم
ثقوب التصريف	24
نمط التصريف	4 صفوف × 6 ثقوب
المادة	سيليكون

الخيارات القياسية والمشبعة بالمضاد الحيوي

الخاصية	قسطرة تصريف قطني قياسية	قسطرة تصريف قطني مشبعة بالمضاد الحيوي
القطر الداخلي	0.8 مم	0.8 مم
القطر الخارجي	1.6 مم	1.6 مم
الطول	80 سم	80 سم
سيليكون	نعم	نعم
علامات الطول من التنتالوم	نعم	نعم
24 ثقب تصريف	نعم	نعم
التشبع بالمضاد الحيوي	لا	نعم
تحرر مضبوط للمضاد الحيوي	—	28 يومًا

رموز المنتجات

الرمز	الوصف
ELCK	قسطرة التصريف القطني الخارجي
ELACK-1608800	قسطرة التصريف القطني الخارجي المشبعة بالمضاد الحيوي

● الرموز البرتقالية لمنتجات مشبعة بالمضاد الحيوي؛ إذ يُشْتَع العامل في المادة ويتحرر بشكل مضبوط على مدى 28 يومًا.

امسح الرمز لصفحة المنتج والجدول الكاملة والمعلومات المحدثة.



جهاز منع السحب

يساعد على منع التصريف المفرط عبر الانغلاق الفوري ضد تأثير السحب (السيفون) الذي قد يحدث عند انتقال القسطرة الصفاقية من الوضع الأفقي إلى الوضع العمودي.



أبرز المزايا

01 ضد تأثير السحب (السيفون)

يهدف إلى منع تأثير السحب الذي قد يحدث عند انتقال القسطرة الصفاقية من الوضع الأفقي إلى العمودي.

02 إغلاق فوري

ينغلق عند حدوث تأثير السحب، فيمنع فرط التصريف.

03 يُضاف إلى مجموعات التحويل

خيار لمجموعات Defit وDecurve وDepus؛ تنتهي رموزها بـ «-» ASD.

عن المنتج

- اختياري في مجموعات التحويل البطيئة الصفافية Defit و Decurve و Depus
- يساعد على التحكم في السحب أثناء تغيير وضعية الجسم
- عند توريده ضمن مجموعة، ينتهي الرمز المرجعي باللاحقة "ASD"

يستخدم جهاز منع السحب لتجنب تأثير السحب (السيفون) الذي قد يحدث عندما تتحول القسطرة الصفافية من الوضع الأفقي إلى الوضع العمودي أثناء تصريف السائل الدماغي الشوكي أو تحويله. يتمثل المبدأ الأساسي في إحداث تأثير إغلاق فوري لمنع التصريف الزائد عند حدوث تأثير السحب (السيفون).

يستخدم مع

مجموعات قساطر التحويل من DESU

مجموعات تحويل Depus

مجموعات تحويل Decurve

مجموعات تحويل Defit

رموز المنتجات

عائلة الملحقات

الرمز	الوصف
ASD	جهاز منع السحب
PPCCO	موصل القسطرة المستقيم
PPRAC	موصل القسطرة من النوع L
PP3WCCO	موصل القسطرة من النوع Y (ثلاثي الاتجاه، 3 مخارج)

امسح الرمز لصيغة المنتج
والجداول الكاملة والمعلومات
المحدثة.



موصل القسطرة المستقيم

ملحق يُستخدم لتوصيل أجزاء القسطرة المختلفة أثناء الجراحة عند الحاجة.



أبرز المزايا

01 توصيل القسطرة

يربط أجزاء القسطرة المختلفة أثناء الجراحة عند الحاجة.

02 وصلة مستقيمة

وصلة مستقيمة بين خطين من القساطر.

03 مع مجموعات التحويل والقساطر

يُستخدم عنصر توصيل مع مجموعات التحويل والقساطر من DESU.

عن المنتج

ملحق فرعي يُستخدم لتوصيل أجزاء القسطرة المختلفة أثناء الجراحة عند الحاجة.

- يوفر وصلة مستقيمة بين خطوط القسطرة

- يُستخدم كعنصر توصيل في مجموعات التحويل والقسطرة

يُستخدم مع

مجموعات قساطر التحويل من DESU

مجموعات تحويل Depus

مجموعات تحويل Decurve

مجموعات تحويل Defit

رموز المنتجات

عائلة الملحقات

الرمز	الوصف
ASD	جهاز منع السحب
PPCC0	موصل القسطرة المستقيم
PPRAC	موصل القسطرة من النوع L
PP3WCC0	موصل القسطرة من النوع Y (ثلاثي الاتجاه، 3 مخارج)

امسح الرمز لصيغة المنتج
والجداول الكاملة والمعلومات
المحدثة.



موصل القسطرة من النوع L

ملحق يوجّه القسطرة البطينية أو الصفاقية دون التواء أو انسداد ويربط أجزاء القسطرة معًا.



أبرز المزايا

01 توجيه دون انثناء

يوجّه القسطرة البطينية أو الصفاقية دون انثناء أو انسداد.

02 توصيل القسطرة

يربط أجزاء القسطرة المختلفة أثناء الجراحة.

03 مع مجموعات التحويل

ينظّم الاتصال بين القسطرة البطينية والصمام.

موصل القسطرة من النوع L

عن المنتج

- يوجّه القسطرة بزاوية مناسبة
- يساعد على منع الالتواء والانسداد
- مُضمّن في مجموعات التحويل بوصفه الموصل القائم الزاوية

ملحق فرعي يُستخدم عند الحاجة لتوجيه القسطرة البطيئة / الصفاقية دون التسبب في التواء أو انسداد، وكذلك لتوصيل أجزاء القسطرة المختلفة معًا أثناء الجراحة.

يُستخدم مع

مجموعات قساطر التحويل من DESU

مجموعات تحويل Depus

مجموعات تحويل Decurve

مجموعات تحويل Defit

رموز المنتجات

عائلة الملحقات

الرمز	الوصف
ASD	جهاز منع السحب
PPCCO	موصل القسطرة المستقيم
PPRAC	موصل القسطرة من النوع L
PP3WCCO	موصل القسطرة من النوع Y (ثلاثي الاتجاه، 3 مخارج)

امسح الرمز لصيغة المنتج
والجداول الكاملة والمعلومات
المحدّثة.



موصل القسطرة من النوع Y

ملحق ثلاثي الاتجاه يربط تحويلتين بقسطرة صفاقية واحدة، أو يمنح التحويللة مخرجين صفاقيين أو مدخلين بطينيين.



أبرز المزايا

01 وصلة ثلاثية الاتجاه

يربط تحويلتين بقسطرة صفاقية واحدة.

02 مخرجان

يمنح التحويللة مخرجين لقسطرتين صفاقيتين.

03 مدخلان

يمنح التحويللة مدخلين لقسطرتين بطينيتين.

موصل القسطرة من النوع Y

عن المنتج

- يربط تحويلتين بقسطرة صفاقية واحدة
- يوفر مخرجًا من تحويلة واحدة إلى قسطين صفاقيتين
- يوفر مدخلين لقسطين بطينيتين في تحويلة واحدة

ملحق فرعي يُستخدم عند الحاجة لربط تحويلتين بقسطرة صفاقية، أو لتوفير مخرج لقسطين صفاقيتين من تحويلة واحدة، أو لتوفير مدخلين لقسطين بطينيتين في تحويلة واحدة.

يُستخدم مع

مجموعات قساظر التحويلة من DESU

مجموعات تحويلة Depus

مجموعات تحويلة Decurve

مجموعات تحويلة Defit

رموز المنتجات

عائلة الملحقات

الرمز	الوصف
ASD	جهاز منع السحب
PPCCO	موصل القسطرة المستقيم
PPRAC	موصل القسطرة من النوع L
PP3WCCO	موصل القسطرة من النوع Y (ثلاثي الاتجاه، 3 مخارج)

امسح الرمز لصيغة المنتج
والجداول الكاملة والمعلومات
المحدثة.



رقع الأم الجافية

غشاء الأم الجافية من الكولاجين DECOLL

غشاء الأم الجافية من الكولاجين مصنوع من كولاجين بقري نقي من النوع الأول. بأربعة مقاسات؛ مناسب للتطبيق السطحي (onlay)، جاهز للاستخدام ومعقم بأشعة غاما.



أبرز المزايا

02 **بنية مسام غير نفاذة**
يشكل حاجزاً ضد تسرب السائل الدماغي الشوكي في موضع الإصلاح.

04 **جاهز للاستخدام**
دون تحضير مسبق؛ معقم بأشعة غاما.

01 **كولاجين بقري نقي من النوع الأول**
حاجز قابل للتحلل الحيوي أساسه الكولاجين، صمم لدعم الالتئام.

03 **التطبيق السطحي (Onlay)**
يمكن استخدامه عند مستويات مختلفة من ضغط السائل الدماغي الشوكي.

05 **أربعة مقاسات**
2.5 × 2.5 و 5 × 5 و 7.5 × 7.5 و 10 × 10 سم.

عن المنتج

وتطبيقه تطبيقاً سطحياً (onlay). تشكّل بنية المسام غير النفاذة حاجزاً في موضع الإصلاح وتدعم التحكم في تسرب السائل الدماغي الشوكي. يُورّد المنتج جاهزاً للاستخدام دون أي معالجة مسبقة قبل التطبيق ويُعقم بأشعة غاما. يتوفر DECOLL بأربعة مقاسات: 2.5×2.5 سم و 5×5 سم و 7.5×7.5 سم و 10×10 سم.

DECOLL طعم للأم الجافية قائم على كولاجين بقري من النوع الأول، طوّر كبديل للأم الجافية لإصلاح عيوبها. يُصنّع الغشاء من كولاجين بقري نقي من النوع الأول. وقد صُمّمت البنية القائمة على الكولاجين والقابلة للتحلل الحيوي لدعم عملية الالتئام أثناء إصلاح الأم الجافية. يمكن استخدام DECOLL عند مستويات مختلفة من ضغط السائل الدماغي الشوكي

دواعي الاستعمال الواردة في الكتالوج

- عيوب الأم الجافية بعد جراحة أورام العمود الفقري
- عيوب الأم الجافية الناتجة عن الرضوح
- القيلة السحائية
- القيلة السحائية النخاعية
- عيوب جراحية في الأم الجافية مرتبطة بالورم الشحمي

المواصفات الفنية

الخاصية	DECOLL
نوع المنتج	غشاء الأم الجافية من الكولاجين
المادة	كولاجين بقري نقي من النوع الأول
البنية	قائم على الكولاجين، قابل للتحلل الحيوي
طريقة التطبيق	تطبيق سطحي (Onlay)
بنية المسام	غير نفاذ
خيارات المقاس	10×10 / 7.5×7.5 / 5×5 / 2.5×2.5 سم
المعالجة المسبقة	لا يوجد
التقديم	جاهز للاستخدام
التعقيم	غاما

رموز المنتجات

الرمز	الوصف
DCL2525	غشاء الأم الجافية من الكولاجين 2.5×2.5 - DECOLL سم
DCL5050	غشاء الأم الجافية من الكولاجين 5×5 - DECOLL سم
DCL7575	غشاء الأم الجافية من الكولاجين 7.5×7.5 - DECOLL سم
DCL100100	غشاء الأم الجافية من الكولاجين 10×10 - DECOLL سم

امسح الرمز لصيغة المنتج
والجداول الكاملة والمعلومات
المحدّثة.



رَقْع الأم الجافية

غشاء الأم الجافية من الكولاجين DURASHEET

مصفوفة طعم للأم الجافية مصنوعة من كولاجين بقري نقي من النوع الأول. بأربعة مقاسات؛ قابلة للاستخدام من كلا السطحين، قابلة للخياطة، جاهزة للاستخدام ومعقمة بأشعة غاما.



أبرز المزايا

01 كولاجين بقري نقي من النوع الأول

مصفوفة طعم للأم الجافية قابلة للتحلل الحيوي أساسها الكولاجين.

03 الوجهان

يمكن وضع أي من وجهي الغشاء على موضع العيب.

05 سطحي، جاهز للاستخدام

لمستويات مختلفة من ضغط السائل الدماغي الشوكي؛ دون تحضير مسبق، معقّم بأشعة غاما.

02 قابل للخياطة

قوة شدّ عالية وبنية مناسبة للخياطة.

04 امتصاص عالٍ

تتمتع مصفوفة الكولاجين بقدرة امتصاص عالية.

06 أربعة مقاسات

2.5 × 2.5 و 5 × 5 و 7.5 × 7.5 و 10 × 10 سم.

عن المنتج

يمكن استخدام DURASHEET من أي من سطحه، ويتميز ببنية قابلة للخياطة وقوة شد عالية وسعة امتصاص عالية. يُورَد المنتج جاهزاً للاستخدام ولا يتطلب معالجة مسبقة إضافية قبل التطبيق. يُقدَّم DURASHEET بأربعة مقاسات – 2.5 × 2.5 سم و 5 × 5 سم و 7.5 × 7.5 سم و 10 × 10 سم – ويُعقَّم بأشعة غاما.

DURASHEET مصفوفة طعم للأم الجافية قائمة على الكولاجين، طُوِّرت كبديل للأم الجافية لإصلاح عيوبها. يُصنَّع المنتج من كولاجين بقري نقي من النوع الأول. وقد صُمِّمت بنيته الكولاجينية القابلة للتحلل الحيوي لدعم عملية الالتئام. يمكن استخدام الغشاء عند مستويات مختلفة من ضغط السائل الدماغي الشوكي وتطبيقه تطبيقاً سطحيًا (onlay). تشكّل بنية المسام غير النفاذة حاجزاً مادياً يهدف إلى المساعدة في التحكم في تسرب السائل الدماغي الشوكي.

دواعي الاستعمال الواردة في الكتالوج

- عيوب الأم الجافية بعد جراحة أورام العمود الفقري
- عيوب الأم الجافية الناتجة عن الرضوح
- القيلة السحائية
- القيلة السحائية النخاعية
- عيوب جراحية في الأم الجافية مرتبطة بالورم الشحمي

المواصفات الفنية

الخاصية	DURASHEET
نوع المنتج	غشاء الأم الجافية من الكولاجين
المادة	كولاجين بقري نقي من النوع الأول
البنية	قائم على الكولاجين، قابل للتحلل الحيوي
طريقة التطبيق	تطبيق سطحي (Onlay)
السطح القابل للاستخدام	أي من السطحين
خيارات المقاس	10×10 / 7.5×7.5 / 5×5 / 2.5×2.5 سم
المعالجة المسبقة	لا يوجد
التعقيم	غاما
سعة الامتصاص	مرتفع
القابلية للخياطة	مناسب
قوة الشد	مرتفع

رموز المنتجات


الرمز	الوصف
DRS2525	غشاء الأم الجافية من الكولاجين 2.5 × 2.5 DURASHEET – سم
DRS5050	غشاء الأم الجافية من الكولاجين 5 × 5 DURASHEET – سم
DRS7575	غشاء الأم الجافية من الكولاجين 7.5 × 7.5 DURASHEET – سم
DRS100100	غشاء الأم الجافية من الكولاجين 10 × 10 DURASHEET – سم

امسح الرمز لصيغة المنتج
والجداول الكاملة والمعلومات
المحدثة.



الطَّعُومُ الْعَظْمِيَّةُ DEBONE الْقَائِمَةُ عَلَى الْكُولَاجِينِ

طعم عظمي قابل للامتصاص الحيوي وموصل للعظم من كولاجين بقري من النوع الأول مع β -TCP، بشكلي حبيبات وإسفنج.

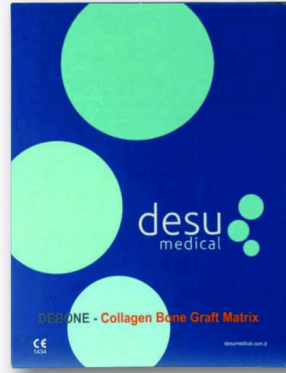

أبرز المزايا

02 موصل للعظم
يشكّل مصفوفة لتكوين عظم جديد.

04 قابل للامتصاص الحيوي
يمتصه الجسم أثناء الالتئام.

06 أربعة أحجام
5 و 10 و 20 و 30 سم³؛ 6-7 مم.

01 كولاجين بقري من النوع الأول و β -TCP
يُضاف فوسفات ثلاثي الكالسيوم بيتا إلى مصفوفة الكولاجين.

03 بيئة للخلايا البانية للعظم
تدعم جزيئات الكولاجين من النوع الأول نمو الخلايا.

05 حبيبات وإسفنج
شكلان للتكيف مع العيوب العظمية المختلفة.

عن المنتج

المقترنة ب- β -TCP بيئة موصلة للعظم لملء العيب العظمي ودعم تكوّن العظم الجديد.

صُمّم DEBONE بشكلي حبيبات وإسفنج ليتكيف مع العيوب العظمية المختلفة. يذكر الكتالوج خيارات حجم 5 سم³ و 10 سم³ و 20 سم³ و 30 سم³ بمقاس منتج 6-7 مم.

DEBONE مصفوفة طعم عظمي قابلة للامتصاص الحيوي وموصلة للعظم تحتوي على كولاجين بقري من النوع الأول و β -TCP. تُنشئ المصفوفة المكوّنة من جزيئات الكولاجين من النوع الأول بنية تدعم تطور الخلايا البانية للعظم، وقد صُمّمت للمساهمة في تكوّن العظم. وتوفر مصفوفة الكولاجين

المواصفات الفنية

DEBONE	الخاصية
طعم عظمي قائم على الكولاجين	نوع المنتج
كولاجين بقري من النوع الأول	المادة الأساسية
β -TCP	مكوّن إضافي
موصل للعظم	خاصية المصفوفة
قابل للامتصاص الحيوي	الخاصية البيولوجية
حبيبات / إسفنج	خيارات الشكل
6-7 مم	مقاس المنتج
5 سم ³ / 10 سم ³ / 20 سم ³ / 30 سم ³	خيارات الحجم
مصفوفة نمو للخلايا البانية للعظم	مصفوفة خلوية

رموز المنتجات

الوصف	الرمز
طعم عظمي DEBONE قائم على الكولاجين - 5 سم ³ / 6-7 مم	DBNG-5C-D04
طعم عظمي DEBONE قائم على الكولاجين - 10 سم ³ / 6-7 مم	DBNG-10C-D04
طعم عظمي DEBONE قائم على الكولاجين - 20 سم ³ / 6-7 مم	DBNG-20C-D04
طعم عظمي DEBONE قائم على الكولاجين - 30 سم ³ / 6-7 مم	DBNG-35C-D04

امسح الرمز لصيغة المنتج
والجداول الكاملة والمعلومات
المحدّثة.



حلول الطعوم المعتمدة على الكولاجين

طعم الكولاجين XENOBONE بقري المصدر

طعم عظمي قابل للامتصاص الحيوي وموصل للعظم، قائم على كولاجين بقري من النوع الأول ومدعم ب- β TCP، بأحجام جسيمات 1.5-0.7 مم و 3-2 مم و 5-4 مم.



أبرز المزايا

02 موصل للعظم
يشكل مصفوفة لتكوين عظم جديد.

01 كولاجين بقري من النوع الأول و β -TCP
مصفوفة طعم عظمي أساسها الكولاجين مدعمة ب- β -TCP.

04 قابل للامتصاص الحيوي
يتمتصه الجسم أثناء الالتئام.

03 بيئة للخلايا البانية للعظم
تدعم جزيئات الكولاجين من النوع الأول نمو العظم.

05 ثلاثة أحجام للجسيمات
1.5-0.7 مم و 3-2 مم و 5-4 مم؛ 5 سم³.

عن المنتج

الكتالوج أن جزيئات الكولاجين من النوع الأول تدعم الخصائص المحفزة لتكوّن العظم.

يُقدّم XENOBONE بثلاثة أحجام للجسيمات للعيوب العظمية المختلفة: 1.5-0.7 مم و 2-3 مم و 4-5 مم.

XENOBONE مصفوفة طعم عظمي قابلة للامتصاص الحيوي وموصلة للعظم تحتوي على كولاجين بقري من النوع الأول و β -TCP. تُنشئ المصفوفة المكوّنة من جزيئات الكولاجين من النوع الأول بيئة نمو للخلايا البانية للعظم وتوفر بنية بيولوجية تهدف إلى دعم تكوّن العظم. ويذكر

المواصفات الفنية

الخاصية	XENOBONE
نوع المنتج	طعم عظمي من الكولاجين بقري المصدر
المادة الأساسية	كولاجين بقري من النوع الأول
مكوّن إضافي	β -TCP
خاصية المصفوفة	موصل للعظم
الخاصية البيولوجية	قابل للامتصاص الحيوي
خيارات الجسيمات	1.5-0.7 مم / 2-3 مم / 4-5 مم
دعم خلوي	مصفوفة نمو للخلايا البانية للعظم
تكوّن العظم	بنية داعمة

رموز المنتجات

الرمز	الوصف
XBN-0715W-5CC	طعم الكولاجين XENOBONE بقري المصدر - 1.5-0.7 مم
XBN-23W-5CC	طعم الكولاجين XENOBONE بقري المصدر - 2-3 مم
XBN-45W-5CC	طعم الكولاجين XENOBONE بقري المصدر - 4-5 مم

امسح الرمز لصيغة المنتج
والجداول الكاملة والمعلومات
المحدّثة.



حلول الطعوم المعتمدة على الكولاجين

غشاء الكولاجين الحاجز COLL-OS

غشاء كولاجين حاجز مصنوع من كولاجين بقري نقي من النوع الأول. بأربعة مقاسات؛ مناسب للتطبيق السطحي (onlay)، جاهز للاستخدام ومعقم بأشعة غاما.



أبرز المزايا

01 كولاجين بقري نقي من النوع الأول

غشاء حاجز قابل للتحلل الحيوي أساسه الكولاجين.

02 لطب الأسنان

صُمم لتغطية المنطقة المطعّمة في جراحة الفم.

03 مع XENOBONE

يمكن استخدامه مع الطعم العظمي من مجموعة طب الأسنان.

04 جاهز للاستخدام

دون تحضير مسبق؛ معقم بأشعة غاما.

05 أربعة مقاسات

2.5 × 1.25 و 2 × 1.5 و 3 × 2 و 2.5 × 2.5 سم.

عن المنتج

الغشاء جاهز للاستخدام دون تحضير مسبق ومعقم بأشعة غاما. يتوفر COLL-OS بأربعة مقاسات: 2.5×1.25 سم و 2×1.5 سم و 3×2 سم و 2.5×2.5 سم. ويمكن استخدامه مع الطعم العظمي XENOBONE من عائلة المنتجات نفسها.

COLL-OS غشاء حاجز مصنوع من كولاجين بقري نقي من النوع الأول لاستخدامه في طب الأسنان وجراحة الفم. يتميز ببنية قائمة على الكولاجين وقابلة للتحلل الحيوي، وقد صُمم لتغطية المنطقة المطعمة في إجراءات الطعم العظمي وتكوين حاجز فوق موضع العيب.

دواعي الاستعمال الواردة في الكتالوج

- طب الأسنان وجراحة الفم
- تغطية المنطقة المطعمة في إجراءات الطعم العظمي

المواصفات الفنية

COLL-OS	الخاصية
غشاء كولاجين حاجز	نوع المنتج
طب الأسنان وجراحة الفم	مجال الاستخدام
كولاجين بقري نقي من النوع الأول	المادة الأساسية
قائم على الكولاجين، قابل للتحلل الحيوي	البنية
2.5×1.25 / 2×1.5 / 3×2 / 2.5×2.5 سم	خيارات المقاس
لا يوجد	المعالجة المسبقة
جاهز للاستخدام	التقديم
غاما	التعقيم

رموز المنتجات

الوصف	الرمز
غشاء الكولاجين الحاجز 1.25×2.5 - COLL-OS سم	CLS12525
غشاء الكولاجين الحاجز 1.5×2 - COLL-OS سم	CLS152
غشاء الكولاجين الحاجز 2×3 - COLL-OS سم	CLS23
غشاء الكولاجين الحاجز 2.5×2.5 - COLL-OS سم	CLS2525

امسح الرمز لصيغة المنتج
والجداول الكاملة والمعلومات
المحدثة.

